

**Vertrag zur Vermietung des Magnetfeldes**



*Allgemeine Angaben des Mieters:*

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Für welches Tier wird das Magnetfeld ausgeliehen (Pferd, Hund, Katze): \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Optional:

Kurze Beschreibung der Beschwerden / Grund der Miete:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Bitte geben Sie an was Sie gerne mieten möchten:*

- Genickband
- Beingamasche
- Hufschuh
- Magnetfeldmatte

### Preise der Miete:

4 Wochen – 80,00 € zuzüglich Versandkosten

6 Wochen – 110,00 € zuzüglich Versandkosten

Das Gerät wird Ihnen zugesendet bei Erhalt des ausgefüllten Vertrags und der Kautions.  
Die Lieferzeit beträgt 3-5 Tage. Bitte beachten Sie Sonn- und Feiertage.

### Allgemeine Infos

Carolin Wörschhauser und die Hersteller der Therapiegeräte weisen ausdrücklich darauf hin, dass mit den Programm- und Indikationsbeschreibungen, sowie für die im Folgenden aufgeführten Anwendungs- und Wirkungsbereiche kein Wirksamkeits- oder Heilversprechen einhergeht. Die Anwendung mit diesen Geräten kann den Tierarzt nicht ersetzen. Die Wirkung ist trotz umfangreicher Publikationen (Arztschriften, Erfahrungsberichte, Doktorarbeiten) schulmedizinisch umstritten und nicht allgemeinmedizinisch anerkannt. Sie gehören zu den komplementären Therapieverfahren.

#### §1 Gegenstand der Vermietung:

Ein Magnetfeld Therapie Gerät „Magnetopulse“. Umfassend ein Steuergerät (Magnetopulse), eine Betriebsanleitung sowie (nur eins ist durch Ankreuzen auszuwählen)

- Genickband                       Beingamasche                       Hufschuh

Oder Magmobil – eine Magnetmatte , Steuergerät, Akuladesation und Anleitung

- Magnetfeldmatte - Magmobil

Die Nutzung ist ausschließlich für Pferde vorgesehen und erlaubt. Magmobil für Pferde, Hunde, Katzen und Mensch.

Die Vermieterin und der Hersteller der Therapiegeräte weisen ausdrücklich darauf hin, dass mit den Programm- und Indikationsbeschreibungen, sowie für die im Folgenden aufgeführten Anwendungs- und Wirkungsbereiche kein Wirksamkeits- oder Heilversprechen einhergeht. Die Anwendung mit diesen Geräten kann den Tierarzt nicht ersetzen. Die Wirkung ist trotz umfangreicher Publikationen (Arztschriften, Erfahrungsberichte, Doktorarbeiten) schulmedizinisch umstritten und nicht allgemein medizinisch anerkannt. Sie gehören zu den komplementären Therapieverfahren.

## §2 Mietdauer

Die reguläre Mietdauer beträgt 4 Wochen und kann um jeweils 2 Wochen erweitert werden.

Die Maximale Mietzeit beträgt 12 Wochen.

## §3 Mietpreis und Kautions und Zahlung

Der Mietpreis für die ersten vier Wochen beträgt 80,- €, jede Verlängerung der Mietdauer um zwei Wochen erhöht den Mietpreis um 30,- €.

Zur Zahlung fällig ist der Mietpreis sowie die Kautions binnen einer Woche nach Unterzeichnung dieses Vertrags auf folgendes Konto der Mieterin:

Kontoinhaber: Carolin Wörschhauser,  
IBAN: DE67 3006 0601 0107 2061 65,  
Deutsche Apotheker und Ärztebank.

Die Kautions für das Gerät beträgt 450 €. Bei sachgemäßer Rückgabe erhält der Mieter die Kautions wieder vollständig zurück, durch Überweisung auf oben genannte Kontoverbindung des Mieters binnen einer Woche nach Eingang der Rücksendung.

Die Kautions darf für eventuelle Schäden oder Verluste zur Verrechnung zurückgehalten werden, die Vermieterin muss binnen einer Woche nach Rückerhalt des geliehenen Gerätes einen Schaden oder Verlust geltend machen.

Die Kautions kann darüber hinaus verrechnet werden mit noch nicht vorausbezahlten Mietpreisen.

## §4 Lieferung und Rücksendung

Die Vermieterin verpflichtet sich nach Eingang der Kautions und des Mietpreises auf ihr Konto das Gerät binnen drei Werktagen zu versenden.

Nach Ablauf der Mietdauer verpflichtet sich der Mieter ebenfalls das Gerät binnen drei Werktagen auf seine eigenen Kosten durch die deutsche Post zurückzusenden. Es gilt das Absendedatum.

Sollte durchs den Versand ein Schaden an der Verpackung entstanden sein ist dies dem Postboten unmittelbar mitzuteilen und zu beanstanden. Sollten darüber hinaus Funktionsstörungen durch den Versand entstanden sein sind beide Parteien aufgefordert unverzüglich die andere Partei zu informieren.

## §5 Haftung

Der Mieter haftet gegenüber der Vermieterin für Schäden die an dem gemieteten Geräte entstanden sind.

Die Vermieterin verpflichtet sich das Gerät gemäß den Vorschriften regelmäßig zu warten.

## §6 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Der Mieter hat den Vertrag gelesen und verstanden. Sie erklären sich mit dem Inhalt ausdrücklich einverstanden.

Unterschrift Mieter, Datum, Ort:

---


Unterschrift Vermieter, Datum, Ort:

---

Im Anhang des Vertrages befindet sich die Bedienungsanleitung des Gerätes.  
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

## 9. BESCHREIBUNG DES MAGNETOPULSE STEUERGERÄTS

- 1 Ein- und Ausschalter
- 2 Buchsen zum Anschluß des MagnetoPulse Magnetfeldapplikators
- 3 Buchse zum Anschluß des Akkuladegerätes
- 4 Drucktaster zum Aktivieren der Bedienelemente.  
 Nach Betätigen dieser Taste leuchtet das Display blau.  
 Nun können Sie das Therapieprogramm, die Magnetfeldstärke und die Therapiezeit einstellen. Einstellungen sind nur möglich solange das Display blau leuchtet. Das dient dazu, dass sich die Einstellungen während der Therapie nicht verändern. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird die Therapie gestartet.

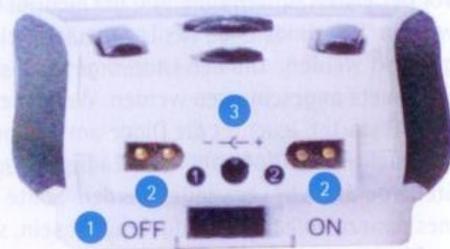

- 5 Mit dieser Taste lässt sich die Magnetfeldstärke einstellen. Die Einstellung geht von 1 bis 10.  
 1 = 20 Gauss = 2mT  
 2 = 40 Gauss = 4mT  
 3 = 60 Gauss = 6mT  
 4 = 80 Gauss = 8mT  
 5 = 100 Gauss = 10mT  
 6 = 120 Gauss = 12mT  
 7 = 140 Gauss = 14mT  
 8 = 160 Gauss = 16mT  
 9 = 180 Gauss = 16mT  
 10 = 200 Gauss = 20mT     Angaben sind ca. Werte.

- 6 Mit dieser Taste können die Therapieprogramme 1 bis 6 ausgewählt werden
- 7 Mit dieser Taste kann der Signalton für das Therapieende eingeschaltet werden. Im Display erscheint „Set“
- 8 Mit dieser Taste kann die Therapiezeit eingestellt werden. Einstellung von 10 min. bis 60 min. in 10 Minuten Schritten. In der Grundeinstellung ist die Therapiezeit auf 30 Minuten eingestellt.

- 9 Anzeige der Magnetfeldintensität
- 10 Anzeige des ausgewählten Therapieprogramms und der Therapiefrequenz
- 11 Akkuladestandsanzeige
- 12 Anzeige Therapiedauer

- 13 Diese 3 Balken zeigen an, ob der MagnetoPulse-Applikator angeschlossen ist. Nur dann arbeitet das Gerät – die Therapiezeit läuft rückwärts. Ist MagnetoPulse-Applikator angeschlossen und keine der Balken zu sehen, liegt ein Fehler vor.



### Erläuterung der Displayanzeige



Modulierter Frequenzbereich	2-15,6 Hz
Magnetfeldstärke	max. 50 $\mu$ Tesla (10 cm über Applikator), in Schritten von je 5 $\mu$ T linear reduzierbar
Programme	6, zeitgesteuert
Laufzeit	ca. 3 Stunden im Batteriebetrieb, unbegrenzt mit Netzteil
Anwendungsstell	1 Applikator anschlüßbar
Toleranzbereich	alle angegebenen Werte $\pm$ 15 %
Arbeitsbedingungen	Temperaturbereich: 10 °C bis 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 75 % Luftdruck: 70 bis 106 kPa
Transport- und Lagerbedingungen	Temperaturbereich: -10 °C bis 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % Luftdruck: 50 bis 106 kPa

**Technische Daten Applikatoren**

MAGmobil Applikator silbergrün (50x30 cm)	Applikator mit einer integrierten Spule zur Behandlung kleinerer Körperbereiche
MAGmobil Applikator silbergrün (160x60 cm)	Applikator mit einer integrierten Spule
MAGmobil Applikator oval silbergrün (45x35 cm)	Applikator mit einer integrierten Spule
MAGmobil Applikator oval silbergrün (60x45 cm)	Applikator mit einer integrierten Spule
Applikator Horse (incl. 2 Garnstricken)	Applikator mit einer integrierten Spule

**Beschreibung der Programme**


Prog. Nr.	Arbeitszyklen	Frequenz	Frequenzband	Indikation
1	1	10,4 Hz	Alpha	Wundheilung
2	1	15,6 Hz	Beta	Aktivierend, Knochen, Krampfl., Gelenke, Entzündungen, Ödeme
3	2	5,2 Hz	Theta	Entspannend, Schmerz, schlafend
4	7	2 Hz	Delta	Entspannend, Schlafstörungen
5	1	7,8 Hz	Schumann-Frequenz	Psychische und psychosomatische Leiden, Alternative zu Programm 1-4
6	Stimuliert mit den Parametern von Programm 1 bis 5 abwechselnd, je 5 Minuten, Reihenfolge: 1, 3, 2, 4, 5			

**Impulsform**



**Ansichten des Gerätes**

1. Programmwahltaste
2. Timer-Vorwahl
3. Ein/Aus-Taste
4. Display
5. Editiertaste
6. Intensitätstaste

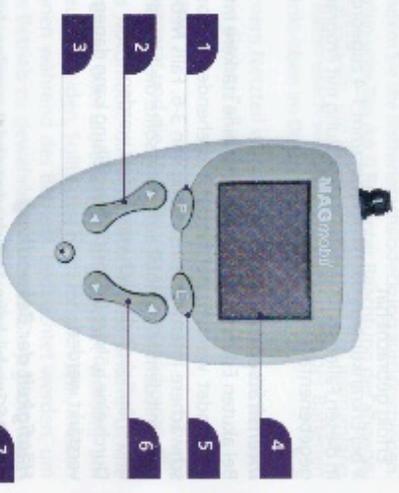

**Steckverbinder**

7. Anschluss Netzteil
8. Anschluss Applikator



- Applikatoren**
9. MAGmobil Applikator 50 x 30 cm
  10. MAGmobil Applikator 160 x 60 cm

